


veštačko osemenjavanje svinja



RAZREĐIVAČI SEMENA NERASTA

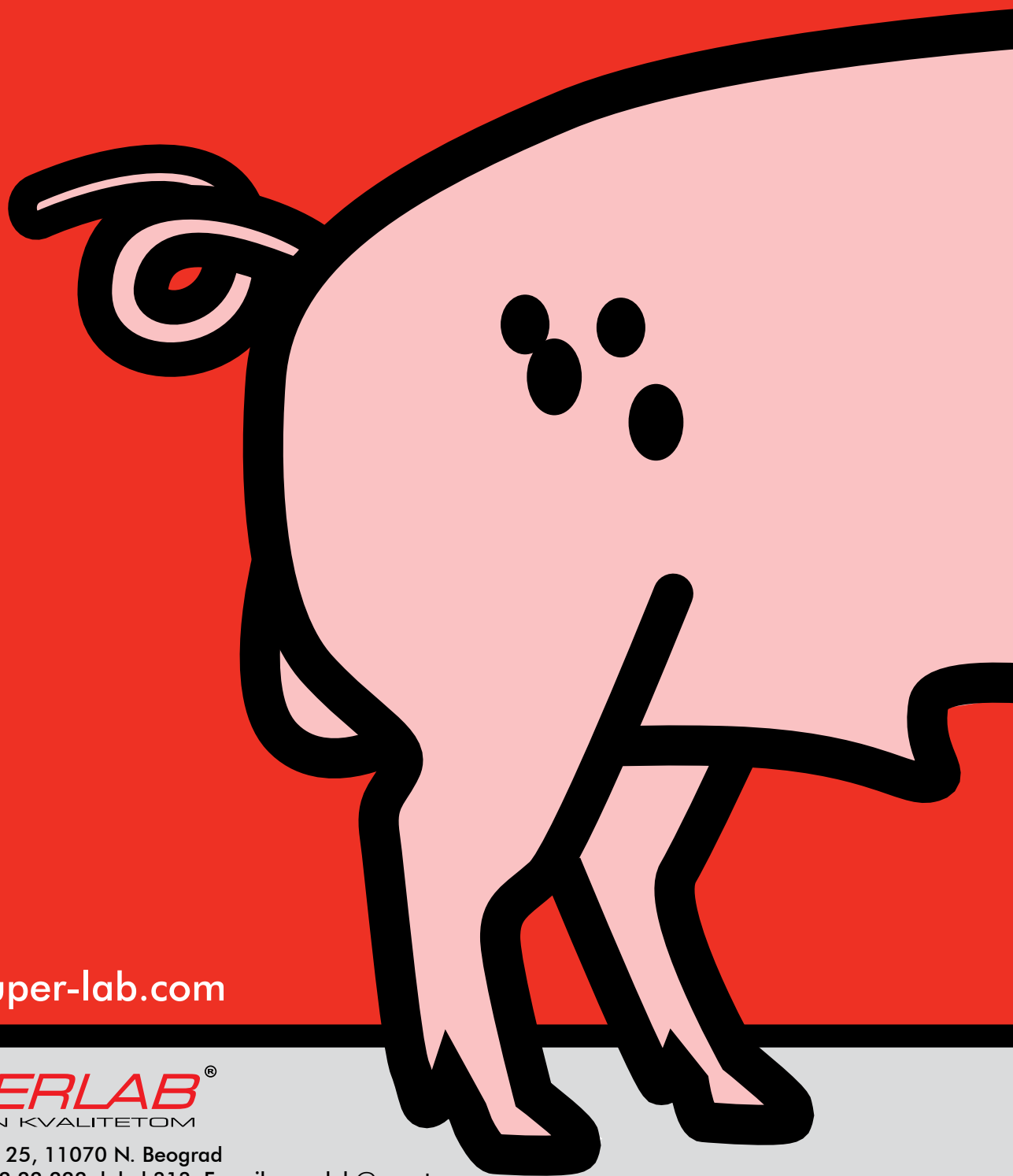

www.super-lab.com

SUPERLAB[®]
INSPIRISAN KVALITETOM

M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd
Tel./Fax: 011 22 22 222, lokal 313, E-mail:superlab@eunet.rs

RAZREĐIVAČI SEMENA NERASTA



Tehničke karakteristike

Slobodne od B.S.A.

Magapor razređivači ne sadrže derivate animalnih proteina (Slobodni od Goveđih Serum Albumina) zbog prevencije prenosa potencijalnih patogena.

Magapor razređivači sadrže kombinaciju antibiotika, u skladu sa **Evropskom Direktivom 90/429/EEC**, koja omogućava razmenu semenih doza između različitih zemalja.

Kombinacija antibiotika pokriva širok spektar bakterija, dajući veću zaštitu spermatozoidima.

Aluminijsko pakovanje omogućava pogodniju konzervaciju i izolaciju sadržaja.

Potvrda kvaliteta

Magapor je priznat od strane ANEOR-a u skladu sa međunarodnim standardom Kvaliteta Poslovanja **UNE-EN-ISO 9001:2000** za dizajn, razvoj, proizvodnju, distribuciju i prodaju razređivača-konzervanasa za životinje, prvenstveno za svinje.

Potpuna sledljivost:

- Magapor primenjuje interne kontrole i inspekcije tokom svih faza proizvodnje i skladištenja
- Magapor primenjuje standardne procedure rada da bi se izbegle greške bilo koje vrste
- Magapor vodi računa o potvrdi kontrole na svim razređivačima pre puštanja na tržište da bi obezbedili njihovu garanciju
- Svaki sirovinski materijal koji se koristi u proizvodnji Magapor razređivača ima garanciju farmaceutske i prehrambene industrije.

Prateća uputstva

Uslovi skladištenja: Neotvorena pakovanja treba skladištiti na hladnom i suvom mestu, van dometa svetlosnih zraka.

Uputstvo za upotrebu: Da bi dobili optimalan osmolaritet, preporučujemo razređivanje sadržaja uz konstantno mešanje (do kompletnog razređenja) u 1 litru destilovane vode ili vode II tipa kvaliteta na 37 °C



Istraživanje + Razvoj + Inovacije



Impuls za konstantno istraživanje i unapređivanje razređivača podstiče biotehnoški sektor Magapora.

Magapor učestvuje u **EUREKA** i **CDTI** istraživačkim projektima, kao i u saradnji sa španskim i međunarodnim univerzitetima.

VELIKO ISKUSTVO U RAZVOJU I PROIZVODNJI RAZREĐIVAČA !



JEDINSTVENI PROIZVOD NA SVETSKOM TRŽIŠTU !

DICOL – Razređivač proizveden za redukciju bakterijske kontaminacije prilikom kolekcije sperme, pre samog rastvaranja sa uobičajenim razređivačem.

Sadrži šest tipova antibiotika odabranih na osnovu dejstva na bakterije, najčešće uzročnike kontaminacije nerastovskog semena.




Dostupnost

Pakovanja od 1l, 5l i 100l.

Međunarodno prisustvo


Proizvedeno u Španiji od strane Magapor SL.
Predstavništva Magapora i široka mreža distributera nalaze se širom sveta.



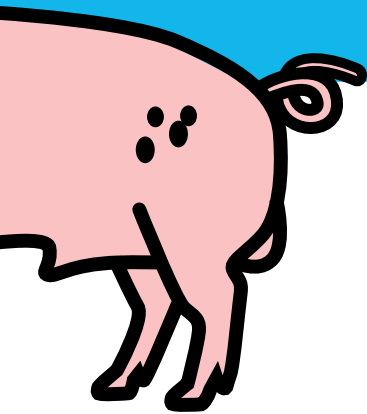

BIO PIG

Razređivač nerastovskog semena baziran na dokazanoj BTS inicialnoj formuli.

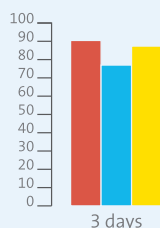

Pokretljivost


SHOST

SORT




OPTIM-I.A.

Razređivač optimalne održivosti nerastovskog semena.

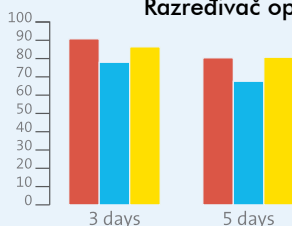


VITASEM LD

Razređivač dugotrajne održivosti nerastovskog semena.

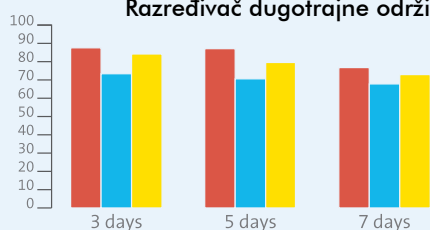

DURAGEN

Ekstra dugotrajni razređivač nerastovskog semena. Formula koja zadovoljava najzahtevnije potrebe čuvanja semena.

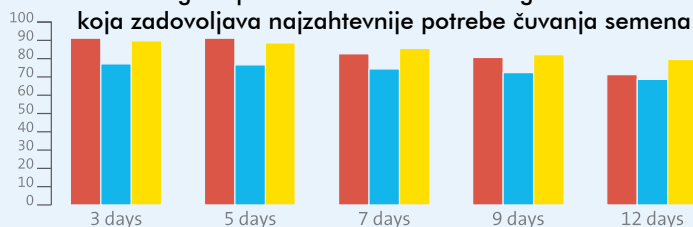

Test konzervacije sproveden na istom ejakulatu koji predstavlja njegove osnovne karakteristike u momentu uzimanja:

Pokretljivost 90%
SHOST* 78%
SORT* 88%

*SHOST: Hipoosmotski test
*SORT: Test osmotske otpornosti



www.super-lab.com

SUPERLAB[®]
INSPIRISAN KVALITETOM

Milutina Milankovića 25, 11070 N. Beograd

Tel./Fax: 011 22 22 222, lokal 313, E-mail: superlab@eunet.rs