

Aktuelno: TUŽNA PRIČA SA SREĆNIM KRAJEM !

Predstavljamo: Marienfeld

Iz ponude izdvajamo: Dispochem - OEM proizvodnja hemikalija

Aktuelno: Radwag tehničke i analitičke vage / Zwiebel tegovi

Aktuelno: Vrhunske laboratorijske elektrode, SI Analytics

Predstavljamo: MINI CENTRIFUGA, IKA mini G

Novosti: Frijžideri sa EX PROOF zaštitom, Lovibond

Predstavljamo: Analiza vazduha, zemljišta i biljaka, ADC Bioscientific

Iz ponude izdvajamo: Laboratorijski sigurnosni sistemi

strana	1-3
strana	4
strana	5
strana	6-7
strana	8
strana	9
strana	10
strana	11
strana	12

Broj 23 / Jun 2014.

AKTUELNO! VANREDNI DOGAĐAJ U MAGACINU SUPERLAB-a U VRČINU

TUŽNA PRIČA SA SREĆNIM KRAJEM !

Magacin SUPERLAB-a, Vrčin,
28. april, 2014.



U noći 28.aprila, 2014. godine, u vatrenoj stihiji koju je teško opisati rečima, nestao je naš Magacin prepun skupocene robe vredne više miliona EUR kao i naš dvodecenijski trud i sve što je uloženo u ovaj vredni objekat.

U gašenju požara učestvovalo je 59 vatrogasaca sa 19 vozila ali bili su nemoćni pred vatrenim stubom koji se uzdizao visoko na nebu. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar posle više od sat vremena borbe sa njim i da spreče da se vatrica ne prenese i na INSTITUT SUPERLAB, koji je svečano otvoren 13.marta ove godine. Da to nisu učinili, šteta bi bila dvostruko veća jer je INSTITUT upravo kompletno opremljen analitičkom i drugom laboratorijskom opremom poslednje generacije.

Zbog svega što su učinili na gašenju požara, svim vatrogascima i njihovim nadređenima se najlepše zahvaljujemo !

SUPERLAB®
Your Lab - Our Passion

Na liniji zadatka ! Neverovatna požrtvovanost vatrogasnih ekipa u gašenju požara !





PRE POŽARA - MAGACIN PREPUN SKUPOCENE ROBE VREDNE VIŠE MILIONA EUR

Naš dvodecenijski trud i sve što je uloženo u ovaj vredni objekat, uništeno je u samo nekoliko sati !



ZA NAS JE NAJVAŽNIJE DA NIJE BILO NASTRADALIH NI POVREĐENIH, JER BI TO BIO NENADOKNADIV GUBITAK ZA NAŠ KOLEKTIV I DRUŠTVO U CELINI !



SLIKE MAGACINA POSLE VATRENE STIHIJE





PARTNERSTVO NA DELU !

Prosto smo bili iznenađeni i zatečeni po-drškom koju su nam uputuli naši poslovni partneri kako iz Srbije tako i iz inostranstva i zaista ne znamo kako da to opišemo. Posle samo nekoliko dana, naše službe počele su sasvim normalno da funkcionišu ali zahvaljujući i nadljudskim naporima naših zaposlenih !

Od strane naših kupaca, dobili smo razumevanje za kašnjenje u isporuci robe koju ćemo morati ponovo da uvezemo a koja je izgorela ili toliko oštećena da se ne može koristiti.

OSLONILI SMO SE NA NAJBOLJE !



RAZUMEVANJE OD STRANE KUPACA !



AS Neživotno osiguranje a.d.o.
Osnivač Adriatic Slovenica

Zvanično osiguranje
Olimpijskog tima Srbije



Ova tužna priča imala bi još tužniji kraj da u izboru osiguravajuće kuće nismo odabarali pravog partnera, AS Osiguranje iz Beograda, čerka-kompanije Adriatica Slovenica.

Za pokriće naše imovine koja se meri stotinama miliona dinara, plaćali smo svake godine simbolične premije jer se radi o iznosima koji su obzirom na ono što smo dobili u zaštiti naše imovine, zaista mali.U izboru osiguravajuće kuće rukovodili smo se pre svega **iskrenim i profesionalnim** odnosom ljudi iz osiguranja sa kojima smo imali sreću da sarađujemo, što planiramo da činimo i u buduće.

Menadžeri AS Osiguranja su na sva naša pitanja imali stručne i jasne odgovore, i ni u jednom slučaju se nije dogodilo da ne znamo šta i kako da na najbolji mogući način osiguramo. Sada, kada se našoj kompaniji dogodila velika nesreća u AS Osiguranju smo našli oslonac i zaštitu, a u njihovim ljudima naišli smo na prave poslovne partnere i prijatelje.


Zbog svega navedenog koristimo ovu priliku da svim našim poslovnim partnerima i prijateljima preporučimo:

**AS Neživotno osiguranje, Osnivač Adriatic Slovenica,
Bulevar Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd,
www.as-osiguranje.rs ; Telefon Centrale:011-3121665**



Paul Marienfeld GmbH & Co. KG je srednja porodična firma koja se nalazi u Lauda-Königshofen u Nemačkoj. Marienfeld nudi sveobuhvatni spektar kvalitetnog laboratorijskog stakla za mikroskopska, predmetna i pokrovna stakla, komore za brojanje, kapilarne cevi, laboratorijsko posuđe i volumetrijsko staklo na kome je Marienfeld napravio svoje ime i međunarodno priznati brend. Mnogi proizvodi od plastike i porcelana u opšte laboratorijskom radu dopunjuju ukupan assortiman laboratorijskog stakla. **Brend Marienfeld** je postao sinonim za kvalitet i pouzdanost. Iskustvo od preko 90 godina u razvoju i proizvodnji laboratorijskog stakla.

Izdvajaju se predmetna i pokrovna stakla čije su karakteristike: visoka spektralna transmisija, bezbojan izgled, odličan optički kvalitet, niska autofluorescencija. Odobrena su za **In-vitro** dijagnostiku (**IVD**) i primenu, u skladu je sa **IVD** direktivom **98/79/EC** sa **CE** oznakom i brojem serije za sve informacije. O ovoj temi pisaćemo više u sledećem broju LABinfo.

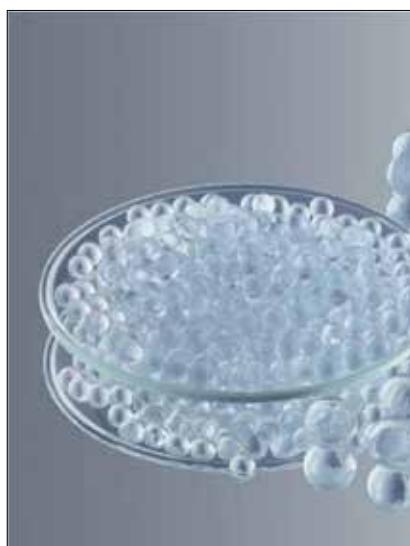

SVETSKI PROIZVODAČI HEMIKALIJA PAKUJU ZA VAS,

SA NAŠIM SUPERLAB®
Your Lab - Our Passion

LOGOM !

SVETSKI KVALITET PO DOMAĆIM CENAMA !

SUPERLAB Vam sada nudi hemikalije standardnog kvaliteta sa svim potrebnim certifikatima a po cenama koje su značajno niže od tržišnih, tako da za najnižu moguću cenu dobijate garantovani kvalitet koji će zadovoljiti sve Vaše rutinske potrebe za laboratorijskim hemikalijama i reganesima.

OEM PROIZVODNJA ILI PRIVATE LABEL je u svetu odavno standardni način da se zadovolje potrebe svih kupaca, kako onih sa velikim budžetima tako i onih čiji su budžeti za nabavku relativno skromni. Na našem tržištu, ako izuzmemo snabdevanje velikih trgovinskih lanaca i to uglavnom prehrambenom robom, ovo je retkost a koliko znamo, u oblasti laboratorijskog snabdevanja, ovo je jedina takva ponuda.

Svakako da će **VWR** sa svojim brendovima hemikalija i reagenasa biti naš prvi izbor u ponudi analitičkim laboratorijama koje ne žele kompromis u odnosu cena/kvalitet a da ćemo drugim laboratorijama nuditi hemikalije i reagnese standardnog kvaliteta po značajno nižoj ceni, sa našom nalepcicom **SUPERLAB – Dispochem**.



SUPERLAB®			
Your Lab - Our Passion			
CERTIFICATE OF ANALYSIS			
Product Name: > PETROLEUM ETHER 40 - 60°C GR			
Article No:	> 246		
Batch No:	> 00001007		
Mfg date:	> MAY-2007		
SI. NO.	Tests	Specifications	Results
1	Descriptive	A clear colorless liquid, not more than 10 Hazen units in colour with characteristic odor.	A clear colorless liquid, not more than 10 Hazen units in colour with characteristic odor.
2	Brixine number	<3.0	<3.0
3	Water	<0.01%	0.000%
4	Acidity	<0.0013 ml N% (0.0013 ml N/100 ml)	<0.0012 ml N% (0.0012 ml N/100 ml)
5	Nitro + volatile material	<0.001%	0.0007%
6	Sulphur compound (COS)	<0.00002%	<0.00001%
7	Copper (Cu)	<0.0001%	<0.0001%
8	Iron (Fe)	<0.0001%	0.00007%
9	Lead (Pb)	<0.0001%	<0.0001%

This above product complies as per the specifications of:

SUPERLAB®
Your Lab - Our Passion

M. Milankovića 25 11070 Novi Beograd

Tel./Fax 011 22 22 222

E-mail: superlab@super-lab.com www.super-lab.com





RADWAG BALANCES AND SCALES ADVANCED WEIGHING TECHNOLOGIES



RADWAG TEHNIČKE I ANALITIČKE VAGE SERIJE R2



AS.R



PS.R2



Predstavljamo Vam novu seriju **R2** vaga – vaga kreiranih da što je moguće više olakšaju svakodnevi rad u laboratoriji i pojednostave proces čuvanja rezultata merenja.

Vage **R2** serije spadaju u tzv. „standard“ klasu instrumenata i namenjene su rutinskoj upotrebi u laboratorijskim uslovima koji i ne moraju biti idealni za vaganje. Radwag je **R2** seriju dizajnirao sa jedne strane oslanjajući se na pozitivna iskustva ranije serije C/2 a sa druge osluškujući potrebe i želje korisnika kao i napretke u tehnici. Rezultat je **R2** serija koju Vam ovde predstavljamo.

Ova serija obuhvata vage od analitičkih, opsega 110-310g i rezolucije 0,1mg, preko poluanalitičkih, opsega 210-1000g rezolucije 1mg, pa do tehničkih vaga, opsega 1200-6000g i rezolucije 0,01g. Kreirane su tako da korisniku pruže potrebnu tačnost bez obzira na promene u temperaturi, položaju, ... Za to se stara sistem internih, automatizovanih tegova koji vrše kalibraciju vase čim se za tim ukaže potreba.

Prikaz rezultata merenja se odvija na velikom i čitljivom LCD ekranu. Na ekranu je pridodata i dodatna tekstulana linija čime je omogućen i prikaz dodatnih informacija (ID uzorka, vrednost tare, ...). Veliki broj pikogramskih signala korisniku pruža trenutnu informaciju o aktivnom režimu merenja, izabranim jedinicama, konekciji sa računaram, kao i mernim i servisnim funkcijama. Uz sve to, softver vase pruža i izbor jednog od 9 ponuđenih jezika. Korisniku je obezbeđena velika radna površina tasa načinjenog od nerđajućeg čelika. Pored toga, konstruktivnim rešenjima, olakšano je održavanje čistoće radne površine. Kućište vase je izrađeno od otporne plastične mase.

	Parts counting
	Debsity determination
	Percent setup
	Checkweighing
	Dosing
	Animal weighing
	Statistics
	Totalizing
	Peak hold

Naročita pažnja posvećena je povezivanju vase sa spoljašnjim jedinicama – nije se štedelo na portovima i, pored uobičajenog serijskog RS232, veze možete ostvariti dodatnim RS232 portom, USB A i USB B portovima i (opciono) WiFi konekcijom. Radwag pruža široku paletu standardnih spoljašnjih jedinica: serijski termički, matrični ili štampač etiketa, USB-štampač (PCL), čitač bar-code-a, dodatni LCD ekran, računarska USB tastatura, compact-flash USB memorija, itd. Naravno, omogućeno je i povezivanje vase na računar i korišćenje razultata merenja u različitim programima.

Pored navedenih, softver vase ima još veliki broj opcija – kreiran je da se oslanja na 5 odvojenih, internih baza podataka:

- ✓ baza korisnika (do 10 korisnika),
- ✓ baza proizvoda (do 1000 proizvoda),
- ✓ baza vaganja (do 1000 poslednjih vaganja),
- ✓ baza tara (do 10 podataka)
- ✓ tzv. ALIBI memorija (memorija koja na siguran način čuva podatke o do 100.000 poslednjih vaganja).





Podaci iz ovih baza se mogu razmenjivati među različitim uređajima i vagama, a nivo pristupa podacima regulisan je sistemom korisničkih šifara. Omogućeno je i prenošenje podešavanja sa jedne na drugu vagu.


Po prvi put, **Radwag** je kod ove serije primenio sistem monolitne merne tehnike, podižući na taj način ponovljivost merenja i kreirajući značajno kvalitetniju vagu nego što je to ranije bio slučaj. Izbor jednog od ponuđenog nivoa filtera prilagođava vagu uslovima okruženja (više ili manje vibracije) i time podiže nivo tačnosti merenja koji vaga pruža. Uz stalno praćenje ambijentalnih uslova (temperatura) i sistem automatske kalibracije vase internim tegom, tačnost merenja je obezbeđena u svakom trenutku.

Tastatura vase omogućava brz pristup osnovnim mernim funkcijama, kao i upotrebu 4 programabilna funkcija tastera. Na taj način vagu je moguće prilagoditi željama i potrebama svakog korisnika zasebno.

I sadržaj odštampanog izveštaja je slobodan za definisanje u skladu sa potrebama korisnika – izveštaj može sadržati podatke o korisniku vase, trenutku merenja, merenom proizvodu, bruto, neto i tariranoj masi, izveštaj o kalibraciji, itd. Softver ovih vase dozvoljava i direktno povezivanje sa štampačima koji podržavaju PCL protokol – povezivanje se vrši preko USB porta. Dalje, podatci o merenju se mogu slati i na računar, gde ih prihvata namenski **PW-WIN** ili **RAD-KEY** softver i omogućava njihovu dalju obradu i analizu. Prenos podataka se može vršiti USB ili WiFi vezom.

Veći broj različitih unapred definisanih načina merenja zaokružuje karakteristike ovih vase: brojanje, određivanje gustine, procentualno merenje, kontrolno merenje, doziranje, merenje životinja (dinamičko merenje), statistika, totalizacija, držanje vrha.

SPR - WMI					
	Date/Time	Time	Time	Weighting	Unit
53	2013-08-12	11:53:35	36	93,95760	g
54	2013-08-12	11:53:35	36	93,95770	g
55	2013-08-12	11:53:36	31	93,95680	g
56	2013-08-12	11:53:37	26	93,95680	g
57	2013-08-12	11:53:37	26	93,95700	g
58	2013-08-12	11:53:38	23	93,95700	g
59	2013-08-12	11:53:39	33	93,95700	g
60	2013-08-12	11:53:39	34	93,95690	g
61	2013-08-12	11:53:39	34	93,95690	g
62	2013-08-12	11:53:40	35	94,02260	g
63	2013-08-12	11:53:40	35	97,36450	g
64	2013-08-12	11:53:41	36	181,36910	g

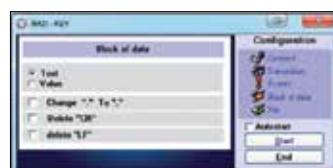

ZWIEBEL

MADE IN FRANCE

ZWIEBEL TEGOVI – VRHUNSKA PRECIZNOST

Predstavljamo Vam francusku kompaniju **Zwiebel** – najvećeg evropskog proizvođača preciznih tegova i masenih standarda. Kompanija **Zwiebel** već dva veka uspešno posluje, za to vreme neprestano rastući i usavršavajući svoje proizvodne procese.

Zwiebel je prisutan u svakom sektoru tržišta. Njihova vrhunska stručnost i sposobnost za inovacije znače da su sposobni da izađu u susret svim zahtevima od 0,1mg do 2 tone u svim klasama tačnosti (od E0 do M3).

Danas, njihove proizvode koristi mnoštvo kupaca širom različitih sektora industrije, uključujući aeronautiku, prehrambenu industriju, hemijsku i farmaceutsku industriju i u Francuskoj i širom sveta. Pored toga, snabdevaju i vodeće referntne kuće od međunarodnog značaja.

Zwiebel uzima učešća u istraživanjima koja definišu nove materijale i istražuju i stvaraju novu automatsku opremu za kalibraciju. Oni su

i prvi proizvođač koji je ispunjava normativne zahteve i jedini koji integrišu sve faze proizvodnje u svojim pogonima – od izbora sirovina do prevoza.



SI Analytics

a **xylem** brand

VRHUNSKE LABORATORIJSKE ELEKTRODE



Važeći standardi za merenje pH vrednosti, definišu vrlo visoke kriterijume vezano za preciznost, ponovljivost, brzinu i pouzdanost merenja. Različit sastav uzorka, različit viskozitet, temperatura, provodljivost i različiti

uslovi merenja, stvaraju ogroman broj različitih tipova merenja. Samo merni sistem (elektroda, pH-metar i puferski rastvori) koji odgovara pojedinom uzorku, može zadovoljiti vežeće standard. **pH elektroda** je ključni element mernog sistema, pošto je jedina u direktnom kontaktu sa uzorkom.

Od svog prvog **patenta pH electrode**, pre 75 godina, **SI Analytics** neprekidno razvija nove tipove elektroda. Danas možemo ponuditi pH elektrode i merne sisteme za sve tipove uzoraka u skladu sa važećim standardima.

SCIENCELINE ELEKTRODE

Silamid® referentni sistem, **Ag/AgCl**, umesto uobičajene srebrne žice koriste posrebreni stakleni cilindar, zahvaljujući većoj površini – brže je uspostavljanje ravnoteže, rezultati su stabilniji i electrode imaju duži životni vek


Svaka elektroda poseduje serijski broj, i sertifikat – ovo je neophodno za zadovoljenje standarda kvaliteta

Različite staklene membrane – **L** (širok opseg i brz odziv), **H** (za visoke temperature), **S** (za alkalne rastvore), **A** (vrlo brz odziv), **N** (različite aplikacije na uobičajenim temperaturama)

Različite difuzne membrane – platinske, keramičke, od brušenog stakla, vlakna

Različiti oblici membrana – sferne, kupaste, konične, ravne ...

Različiti oblici electrode – dužina do 600 mm, minimalni prečnik 3 mm.

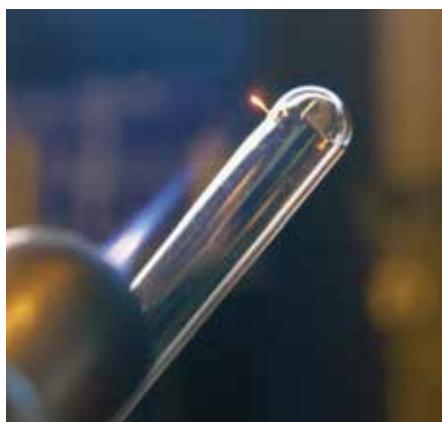

Pored različitih tipova pH elektroda, **ScienceLine** obuhvata i srebrne i platinske electrode, referentne electrode, senzore za merenje provodljivosti, jon-selektivne elektrode, referentne termometre.

Uz elektrode su dostupni odgovarajući konekcioni kablovi sa različitim vrstama konektora: DIN, BNC, 4mm, 2mm ili konektorima za tipa "Metrohm" i "Radiometer"



IKA® German technology

www.ika.com

MINI CENTRIFUGA, IKA mini G

Veliki svetski proizvođač laboratorijske opreme, dodao je svom velikom portfoliju još jedan aparat koji će olakšati rad u laboratorijama. Za sve aplikacije koje ne zahtevaju velike brzine, kompanija SUPERLAB i proizvođač **IKA** Vam predstavljaju mini centrifugu, **Mini G**, koja se može koristiti za mikrofiltraciju i celijsku separaciju...

Providni poklopac dozvoljava konstantno opraćenje rada centrifuge. Ova mala centrifuga obezbeđuje pomoć prilikom rada u laboratorijama za PCR, jer ima mogućnost da centrifugira uzorke kako u PCR kivetama tako i u PRC- stripovima.


Centrifuga obezbeđuje odlično centrofugiranje uzorka na fiksnih 6000 obrata, poseduje digitalni tajmer koji omogućava programiranje rada od 1-99 minuta, poseduje integrisano dugme za brzo zaustavljanje centrifuge koji omogućava sigurnost prilikom rada, centrifuga radi samo ako je providni poklopac zatvoren, obezbeđuje veoma tih rad i jednostavno programiranje...

Pored standardnog rotora od 8x1,5/2 ml, uz aparat se isporučuje i rotor za 4 stripia 8x0,2 ml, dapterom za 8x 0,4 ml, adapterom za 8x0,5 ml, adapterom za 8x0,2 ml.



Accessories included in delivery

Rotor 8 x 1.5 / 2 ml	(1)	Ident. No. 0003918500
Rotor 4 x strip 8 x 0.2 ml	(2)	Ident. No. 0004531300
Adapter set 0.5 ml x 8	(3)	Ident. No. 0004470900
Adapter set 0.4 ml x 8	(4)	Ident. No. 0004470901
Adapter set 0.2 ml x 8	(5)	Ident. No. 0004470902

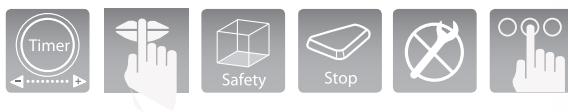

designed
to work perfectly



FRIŽIDERI SA ZAKLJUČAVANJEM ZA UZORKE I HEMIKALIJE, SA EX PROOF ZAŠTITOM

Tintometer® Group

Nova serija **laboratorijskih frižidera** sa zaključavanjem u **EX zaštiti**, u skladu sa standardom **BG-I 850-0**, bezbednost rada u laboratorijama, po kome unutrašnjost frižidera za čuvanje uzoraka i hemikalija mora imati zaštitu od eksplozije i paljenja (u prisustvu zapaljivih i eksplozivnih supstanci). Unutrašnjost frižidera je izrađena od materijala koji onemogućavanju varničenje.

Ovi modeli su u skladu sa standardima i evropskim direktivama:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 94/9/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

Novi modeli ovih frižidera su dostupni u zapreminama od 160, 220, 300 i 490 litara, sa staklenim policama. Frižideri poseduju nisko-bučni kompresor bez vibracija i sistem automatskog otapanja. Namjenjeni su kako za sve vrste laboratorija, tako i za naučno-istraživačke centre.

Tehnički podaci:

- napajanje: 230V/50 Hz
- klimatska klasa:
 - EX160
SN, 10°C-32°C
 - EX 220, EX 300, EX 490
SN-T, 10°C-43°C
- temperaturni opseg 1 -15 °C
- sistem sa automatskim otapanjem
- digitalni displej

EX SERIJA LABORATORIJSKIH FRIŽIDERA



ANALIZA VAZDUHA, ZEMLJIŠTA I BILJAKA



ADC Bioscientific je duže od 40 godina vodeća kompanija vodio u proizvodnji instrumenata za analizu vazduha, zemljišta i biljaka. U saradnji sa vrhunskim naučnicima, **ADC Bioscientific** nastavlja da unapređuje i proširuje lepezu svojih uređaja, a pri tome postavlja nove standarde sa aspekta lakoće upotrebe i rada na terenu. **SUPERLAB** je od početka 2014. godine proširio svoju ponudu opremom proizvođača **ADC Bioscientific**, i postao ovlašćeni (ekskluzivni distributer za Srbiju (Crnu Goru i Bosnu). Time je naša kompanija nastavila da unapređuje svoju ponudu, kako bi se korisnicima ponudila optimalna rešenja, kvalitetna tehnička podrška i blagovremeno održavanje i servis opreme.

ADC Bioscientific akcenat daje inoviranju uređaja u cilju pružanja najboljih karakteristika, čak i u otežanim uslovima, obzirom da su ovi instrumenti namenjeno upotrebi na terenu. Da bi se to obezbedilo **ADC** izlaze svaki svoj uređaj strogim ispitivanjima kvaliteta, a time garantuje dugogodišnju upotrebu od strane korisnika. Ovo je garant za puno poverenje koje se može imati u pouzdanost instrumenata proizvođača **ADC Bioscientific**.

Potreba za ovim aparatima je sve veća kako u naučno-istraživačke svrhe tako i u svakodnevnoj proizvodnji u cilju poboljšanja prinosa.

Uz stručnu podršku koju pruža **SUPERLAB** korisnici će dobiti pomoć oko svih upita vezanih za pri-menu, tehničke detalje ili servis opreme, kako bi dobili optimalan uređaj za svoje potrebe, a pri tome umanjili vreme za istraživanje i analizu/praćenje svojih proizvoda.

AM350 MERAČ POVRŠINE LISTA

AM350 je kompaktan prenosni merač površine lista koji je namenjen preciznom i nedestruktivnom merenju površine lista i vezanih parametara. **AM350** poseduje skener visoke rezolucije sa integriranim procesorom za analizu podataka i memorijom za smeštaj slike.



CCM-300 MERAČ SADRŽAJA HLOROFILA

CCM-300 je jedinstveni merač količine hlorofila, koji je podešen za merenje na uzorcima kod kojih je bilo vrlo teško izvršiti merenje nedestruktivnim metodama

U laboratorijski i u terenskim merenjima **CCM-300** se pokazao kao veoma precizan za merenja koncentracije hlorofila u opsegu od 41mg/m² to 675mg/m².



PGA PRENOSNI ANALIZATOR GASA

PGA je samostalni prenosni merni uređaj namenjen trenutnom merenju koncentracije gasa ili kratkotrajnom praćenju, a našao je upotrebu u širokom spektru geoloških i bioloških istraživanja. Ima opcije merenja velikog broja gasova u raznim mernim opsezima.



LABORATORIJSKI SIGURNOSNI SISTEMI

PROJEKTOVANJE LABORATORIJA I PROIZVODNJA
LABORATORIJSKOG NAMEŠTAJA

RADNI STOLOVI, DIGESTORI, STOLOVI ZA VAGU, POLICE ZA REAGENSE, SUDOPERE, ORMANI SA PUNIM, STAKLENIM ILI USTAKLJENIM VRATIMA, KANCELARIJSKI I ŠKOLSKI NAMEŠTAJ, REPARACIJA LABORATORIJSKOG NAMEŠTAJA, PROJEKTOVANJE LABORATORIJA...

LABO BNOVA
laboratorijski nameštaj

NAMEŠTAJ PO MERI VAŠE LABORATORIJE !



INSTITUT
SUPERLAB®

* projektovali
smo, izradili
i opremili
nameštajem
laboratorije
u INSTITUT-u
SUPERLAB-a



DÜPERTHAL®
SIGURNOSNA OPREMA



SUPERLAB®
Your Lab - Our Passion

M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd, Tel./Fax: 011 22 22 222
www.super-lab.com E-mail: superlab@super-lab.com

design by: **SUPERLAB**® Your Lab - Our Passion

