

Veterinarska dijagnostika

KRUUSE



TonoVet Tonometar

Aparat za brzo i bezbolno određivanje intraokularnog pritiska kod životinja, specijalno kalibrisan za male (psi i mačke) i velike životinje (konji i goveda).

Prednosti:

- Metoda je bezbolna i ne izaziva uznemirenje kod životinja
- Nije potrebna lokalna anestezija
- Brzo merenje intraokularnog pritiska kod različitih vrsta životinja
- Kalibraciona tabela za male i velike životinje
- Aparat je mali i lak za upotrebu
- Zamenljiva sonda prevenira pojavu bakterijskih i virusnih infekcija



GIERTH[®]

X-RAY international



GIERTH HF 80 ML ULTRA LEICHT

High Frequency
Diagnostic X-ray unit



**X-ray for the
21st century!**

Only 6500 grams, constant potential 15 mA, 120 kHz!

GIERTH HF 80 ML ULTRA LEICHT - brand ime za portabilne rendgen aparate najnovije generacije sa superiornim performansama.

- pruža odlične radiografske rezultate na velikom broju različitih životinjskih vrsta.
- visok kvalitet dobijenih snimaka
- akustični i optički x-zrak indikator
- savremeni dizajn
- poseduje mernu traku za merenje razdaljine stola
- težina 6,5 kg uključujući collimator i dual laser
- aluminijumska kutija
- dimenzije L320 mm, W 185 mm, H 170 mm (bez rukohvata)
- Focus: 1,0 mm x 1,0 mm
- mAs: 0,15-30 mAs
- Timer: digitalni, od 0,01-2,00 sec
- Line voltage: 200-260 V; 50/60 Hz
- Izlaz 2 kV: 50-80 kV = 15 mA (in 16 steps)





VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE

SAFEBLUE inseminacioni kateteri

Za higijenski čist i sterilan proces inseminacije bez mogućnosti bakterijske kontaminacije . Sterilno i higijensko pakovanje katetera, zaštitna folija sprečava kontaminaciju pre inseminacije.

U pakovanju sa kateterom se nalazi lubrikant koji omogućava lakšu pasažu katetera kroz vulvu. Kateter tek u vulvi probija zaštitnu foliju i na taj način ne dolazi u kontakt sa spoljašnjom sredinom pre inseminacije.

Tri tipa safeblue katetera:

- Foam tip sa zaobljenim vrhom
- Spiralni tip sa spiralnim vrhom
- Softgilt tip sa zaobljenim vrhom manjih dimenzija, pogodan za inseminaciju kod nazimica





SafeBlue® Foamtip®

SafeBlue® Spirette®

SafeBlue® SoftGilt

OČUVANJE FUNKCIONALNOSTI MEMBRANSKIH PROTEINA, ODRŽAVANJE MEMBRANSKOG INTEGRITETA I MOTILITETA

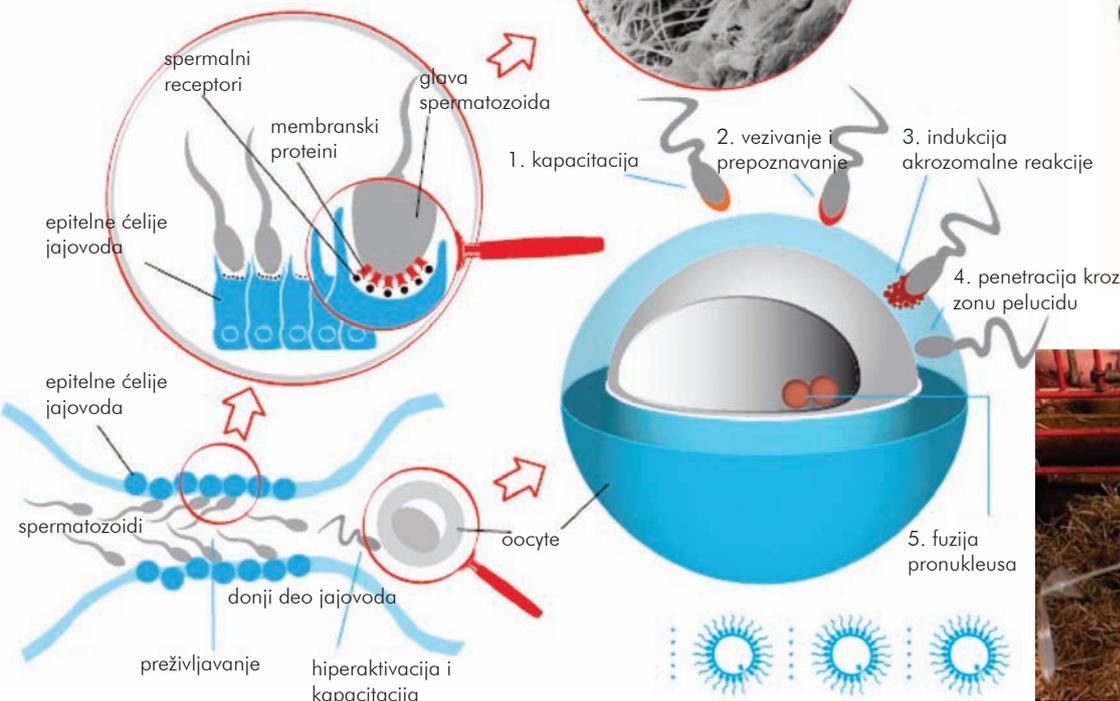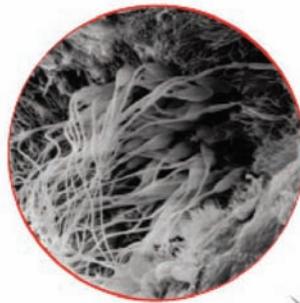



SVINJA




Verona intrauterini inseminacioni kateter

Jednokratni kateteri namenjeni za trans-cervikalnu inseminaciju kod krmača. Svi spermatozoidi su aplikovani direktno u uterus i na taj način lakše dospevaju do jajovoda uz pomoć uterusne kontrakcije. Fertilitet ovako osemenjenih krmača će biti znatno poboljšan i to uz upotrebu manje količine semena. Foam tip katetera sa zaobljenim vrhom je upakovan sa lubrikantom u individualnom pakovanju u zaštitnoj sterilnoj foliji.

Unutrašnji promer katetera je jako mali tako da skoro nema nimalo semene tečnosti koja zaostaje u kateteru. Sterilisano gamma radijacijom.

Trans-cervikalni kateter Verona – Foam tip
pojedinačno pakovani 10/pk

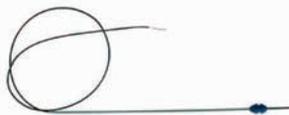

DeepBlue intrauterini inseminacioni kateter

Za duboku intrauterinu inseminaciju krmača kod upotrebe naročito senzitivnog semena, kada je vrlo mali broj pokretnih spermatozoida ili kod duboko smrznutog semena. Fleksibilan i istovremeno čvrst i mekan kateter sa dužinom unutrašnjeg dela od preko 150 cm, može biti aplikovan duboko do vrha roga uterusa. Mali metalni deo će olakšati prolaz kroz cervix. Patentiran proizvod (Univerzitet Murcia, Španija).

KLIMA BOKSEVI



- Klima boks sa kontrolisanom temperaturom za bezbedno čuvanje i skladištenje semena nerastova.
- Mogu da greju i hlade kako bi održali optimalnu temperaturu za seme, nezavisno od spoljašnje temperature.
- Tačna elektronska kontrola temperature
- Napajanje na 12V za mobilnu upotrebu na terenu
- Klima box kapaciteta 40l ili 100 flexituba odnosno bočica za seme, takođe se može koristiti u vertikalnom položaju sa zadatom temperaturom +17C ili opciono sa mogućnošću podešavanja temperature.
- Klima box kapaciteta 18l ili 70 flexituba odnosno bočica za seme, sa zadatom temperaturom +17C ili opciono sa mogućnošću podešavanja temperature.
- Za sve klima bokseve preporučujemo:
Transformator 230V / 12V izlaz 12V / 5A





KRUUSE



VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE SVINJA

KRUUSE Foam tip inseminacionih katetera

Specifikacija:

Dužina: 550 mm

Spoljašnji diameter: 7mm


Unutrašnji diameter: 4,9 mm

Dužina bulbusa: 32 mm

Žuti tip

Kat.br. 340210 100x5/pk.

Kat.br. 340208 pojedinačno pakovanje

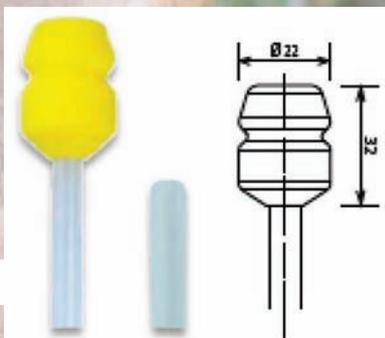


KRUUSE Spiralni tip inseminacionih katetera

Beli, 4/pk.

Sa ručicom i zatvaračem

Kat.br. 340198

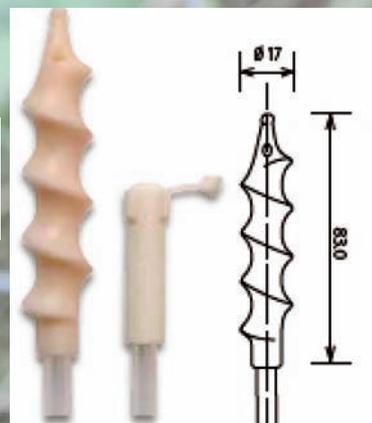

KRUUSE Gilt tip inseminacionih katetera

Zaobljeni vrh sa manjim bulbusom pogodnim za inseminaciju kod nazimica 500x5/pk.

Specifikacija:


Dužina: 550 mm

Spoljašnji diameter: 7 mm

Unutrašnji diameter: 4,9mm

Dužina bulbusa: 34 mm

Kat.br. 340220

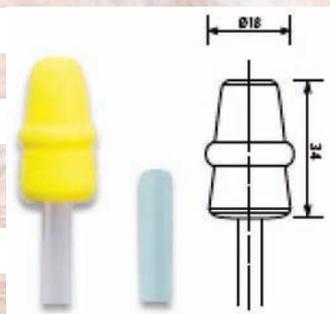


KRUUSE Intra-uterini inseminacioni kateter

Koristi se za intra uterinu inseminaciju, lak i jednostavan za upotrebu. Broj spermatozoida neophodnih za oplodnju može biti redukovan na oko 1 milijardu.

Specifikacija:

Dužina: 500 mm

Dužina sa nastavkom: 670 mm

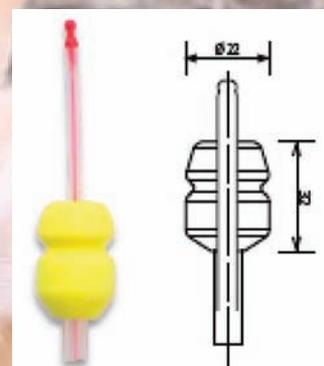

GUMENI INSEMINACIONI KATETER ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU Model Melrose

Visoki kvalitet gume osigurava fleksibilnost i višekratnu upotrebu. Normalno se sterilije.

Kat.br. 340195




KRUUSE Foam tip inseminacioni kateteri sa ručicom i zatvaračem

Dužina: 535 mm

Dužina bulbusa: 32mm

Kat.br. 340214 100x5/pk.

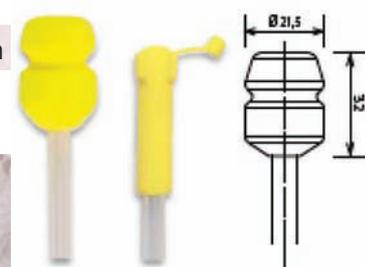



KRUUSE BTS koncentrovani razređivač semena nerastova

Razređivač semena nerastova

Konzervacija semena 3-5 dana nakon razređivanja


Laka i brza priprema razređivača

Sadrži gentamicin

Vreme upotrebe je 12 meseci pri čuvanju na T 20 - 80°C



KRUUSE

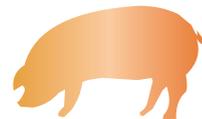

Plastične bočice

Za mešanje i aplikaciju razređenog semena, zapremine 100 ml; pakovanje 100 kom. Kat.br. 340601

Zatvarači različitih boja

Kat.br. 340602 plavi 100/pk

Kat.br. 340603 žuti 100/pk

Kat.br. 340604 zeleni 100/pk

Kat.br. 340605 crveni 100/pk

Kat.br. 340606 beli 100/pk



Hydrofil Coated

Intra-uterine

Insemination Catheter



Cervi-slip



PORCIMARK Sprej za obeležavanje životinja

Visok kvalitet, brzo i zgodno obeležavanje životinja po svim vremenskim uslovima. Brzo se suši i dugo traje.

Dostupan u tri boje i tri veličine.

12/pk

200 ml

Kat.br. 240411 plavi

Kat.br. 240416 crveni

Kat.br. 240425 zeleni

400 ml

Kat.br. 240410 plavi

Kat.br. 240415 crveni

Kat.br. 240420 zeleni

500 ml

Kat.br. 240418 plavi

Kat.br. 240419 crveni

Kat.br. 240424 zeleni



NEW PRODUCT



BOVIVET Superior marker u stiku

Marker u stiku za obeležavanje životinja. Postojanost oko 4 nedelja kod goveda i ovaca i oko 2 nedelje kod svinja.

Marker je napravljen od specijalog voska, parafinskog ulja i visoko kvalitetnih boja. Otporan na temperaturne promene i visok intenzitet boja.

Dostupan u pakovanju od 10 komada

Kat.br. 240300 plavi

Kat.br. 240301 crveni

Kat.br. 240302 zeleni

Kat.br. 240303 crni

Kat.br. 240304 ljubičasti



PORCIVET SPREJ MIRIS NERASTA

Sprej za testiranje prisutnosti estrusa kod krmača i nazimica i njihove spremnosti za inseminaciju.

Sa distance od oko 60 cm sprej prsnuti direktno prema njušci krmače. Ukoliko krmača prihvata pritisak u predelu grebena i vidljivo reaguje na sprej znači da je spremna za inseminaciju.


Kat.br. 241124 250 ml

Kat.br. 241129 110 ml





ELEKTRIČNE OGRADE - ELEKTROPASTIRI

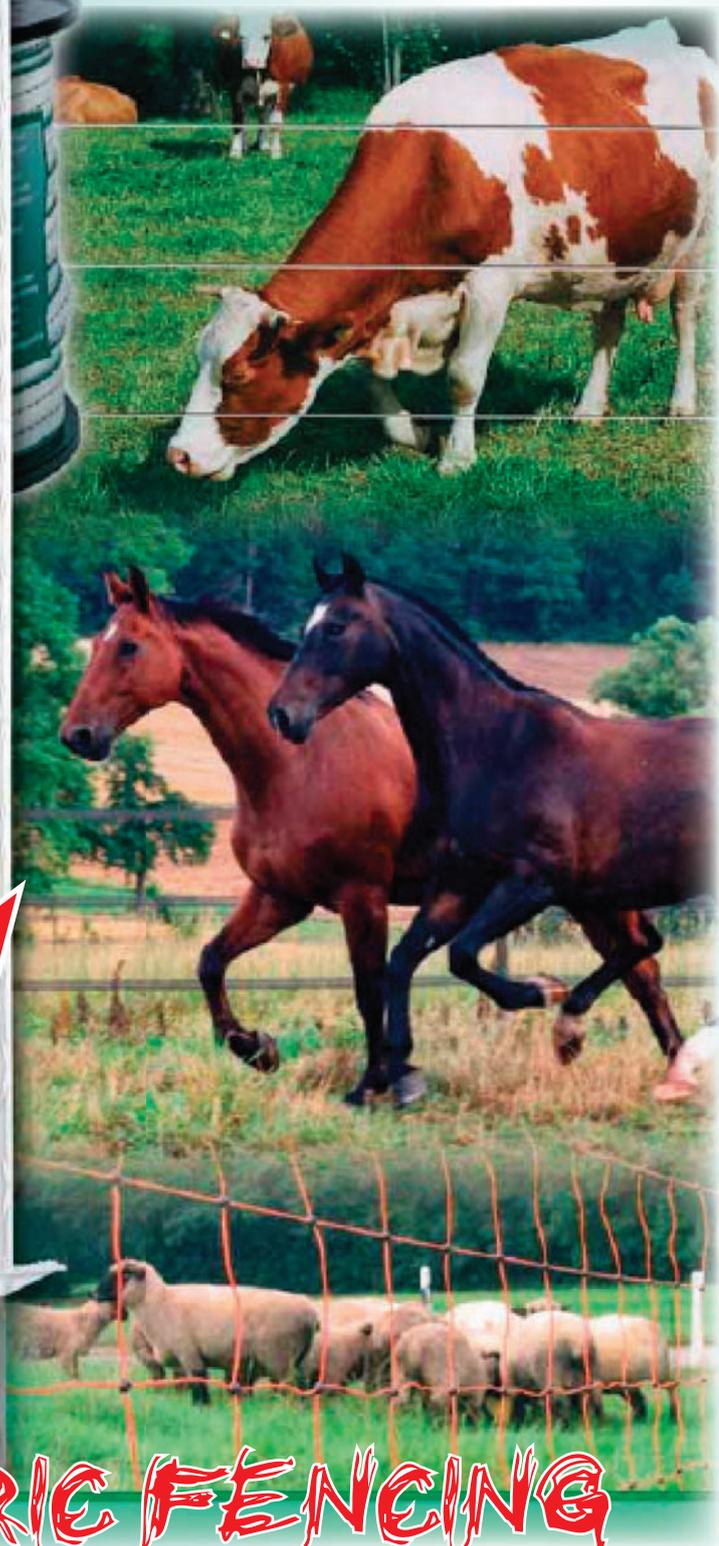

Najnovija generacija elektro-pastira namenjenih bezbednom čuvanju različitih vrsta životinja. Primenom elektro pastira smanjuje se potreba za ljudskom radnom snagom, životinje su u bezbednom okruženom prostoru bez mogućnosti izlaska.

Mogućnost napajanja preko baterija ili sa strujne mreže, kao i putem solarne energije.

Različite vrste materijala za različite vrste životinja: konje, goveda, ovce, pse, zečeve, živinu.

Na osnovu podataka o vrsti životinja, površini koja se ograđuje i izvoru energije, naš stručni tim će Vam napraviti najbolju konfiguraciju elektro pastira uz najbolju moguću cenu.

ELECTRIC FENCING




OPREMA ZA GOVEDA



Cow Lift – mehanizam za podizanje krava - KERBL, Nemačka

Mehanizam za podizanje krava na noge prilikom različitih vidova slabosti. Zahvaljujući velikom glavnom remenu ne vrši se pritisak na nijednu tačku na telu i ne dolazi do ozljeđivanja životinje. Preporučuje se za životinje do 1000kg TM.

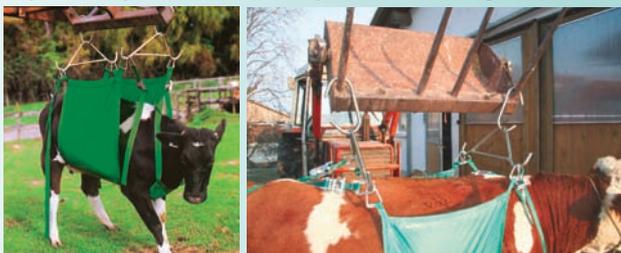

Kaustična mast za obezročavanje (u stiku) - KERBL, Nemačka

Za obezročavanje teladi od 1-4 nedelja starosti. Oko 4-6 teladi mogu biti tretirani jednim stikom.



BUDEX dehorner - KERBL, Nemačka

Jedinstveni tip dehornera, temperaturu dejstva od 700°C postiže za 7 sek. Posедуje bateriju na punjenje što ga čini maksimalno pokretljivim i podesnim za rad na terenu. Komplet uključuje adapter 230 V i 12 V.



Izvlakač sluzi kod novorođene teladi - KERBL, Nemačka

Vakuum pumpa namenjena za aspiraciju sluzi iz usne i nosne šupljine kod novorođene teladi.



TECHNOVIT ProfiVet - KERBL

Technovit ProfiVet je sistem koji pruža mnoge prednosti u savremenoj nezi kopita i papaka.

Koristi se u reparaciji i obnavljanju oštećenih i rascepljenih kopita i papaka.

U kompletu se nalaze specijalne ProfiVet navlake za kopita i papke od fleksibilnog pvc materijala sa mogućnošću adaptacija na kopito.


Specijalna ProfiVet tečnost i puder za reparaciju kopita.



Prostirka za dezinfekciju papaka - KERBL, Nemačka

Napravljena od mekanog upijajućeg materijala (od specijalnog sunđera).

- dimenzije 180x90x3,5 cm
- 30 l dezinfekcionog sredstva za tretman oko 80 krava
- dugo vreme upotrebe (oko 100.000 krava)

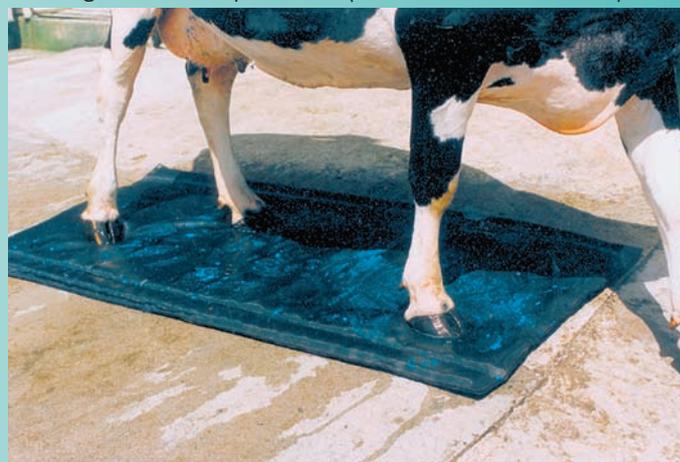



DP-6600 VET

Portabilni veterinarski Ultrazvučni dijagnostički sistem

- Najnovija generacija ultrazvučnih aparata
- Moderan dizajn
- Elektronske sonde
- Standardna konfiguracija obuhvata:
 - DP-6600Vet ultrazvučnu jedinicu
 - 10" monitor
 - 2 konektora za sonde
 - 256-frame cine loop
 - Memoriju 90 slika
 - 2 USB2.0 ulaza
 - Softver
 - Elektronsku konveksnu sondu 35C50EA (2.0/3.5/6.0MHz)



DRAMINSKI Animal Profi Ultrasound Scanner

Prenosiv ultrazvučni skener – savršen za rad na terenu. Brzo i lako dijagnostikovanje graviditeta velikih i malih životinja u njegovoj ranoj fazi.

Standardna oprema se sastoji od sledećeg:

- Mehaničke sonde 5,0 MHz
- Možete povezati abdominalnu sondu za krmače, ovce i kuje, kao i rektalnu sondu za krave i kobile, radeći i dalje sa istim skenerom.
- Kompletnog seta kablova
- Punjača
- Kaiševa za nošenje skenera oko vrata i oko struka
- Gela za ultrazvuk (250ml)
- Uputstva za upotrebu



MEC1200 Vet Pacijent monitoring

- Monitor za praćenje vitalnih funkcija životinja prilikom hirurških intervencija
 - 8,4" kolor TFT monitor sa 4 kanala
 - ECG/ Resp, SpO₂, NIBP, TEMP, PULS
 - Grafički i tabelarni prikaz rezultata
- Dimenzije: 258x128x244 mm
- Težina: 4 kg



BIOHEMIJSKI ANALAJZER, VET EVOLUTION

B.S. Biochemical Systems- Italija

Najmanji višenamenski polu-automatski analizator za veterinarsku kliničku biohemiju i neke hematološke analize. Radi sve vrste biohemijskih analiza (albumin, alkohol, amonijak, anti-trombin, bikarbonat, bilirubin, kalcijum, hlorid, holesterol, HDL/LDL holesterol, kreatinin, glukoza, gvožđe, magnezijum, RCB magnezijum, fosfolipidi, fosfor, ukupni proteini, trigliceridi, urea, Urat,...), enzime (kisela fosfataza, alk. fosfataza, amilaza, AST/GOT, ALT/GPT, CK-NAC, Gama-GT, LDH, lipaza, nukleotidaza, itd).



KRUUSE KRUTECH VIP 2000

Infuziona pumpa

- Mala, lagana i kompaktna infuziona pumpa težine od samo 360 g
- Snabdevena sa litijum-jonskom baterijom (4 sata punjenja za 20 sati rada)
- Pogodna za unos intravenske tečnosti, arterijske infuzije, medikamentata, TPN rastvora i krvi
- Konfigurisana da iskoristi KRUUSE IV infuzioni set sa vazдушnim otvorom



Diatron® Abacus Junior Vet

Hematološki analizator

- Frekvencija rada: 22 uzorka / sat
- Zapremina uzorka: 25 µl pune krvi (u predilucionom modu 50 µl)
- Određivanje 18 hematoloških parametara sa histogramima, uključujući i 3-part diff: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, MCV, RDW, HGB, MHC, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW
- Metod uzorkovanja: otvoren sistem sa automatskim rotorom

