



Poštovane koleginice i kolege,


**Koristimo ovu priliku da Vam poželimo  
srećnu i uspešnu Novu godinu!**

U jedno želimo da Vas obavestimo da je SUPERLAB u 2009.  
godini ekskluzivni distributer kompanije **MINDRAY** za  
program veterinarskih ultrazvučnih skenera, koji su već naišli na  
odličan prijem na našem tržištu kako po kvalitetu tako i po ceni.


Kao što su ljudi iz **MINDRAY**-a izabrali nas za partnere za  
tržište Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nadamo se da  
ćete i Vi ubuduće kao i do sada pokloniti poverenje nama.

Srdačan pozdrav

Vaš VETLAB tim

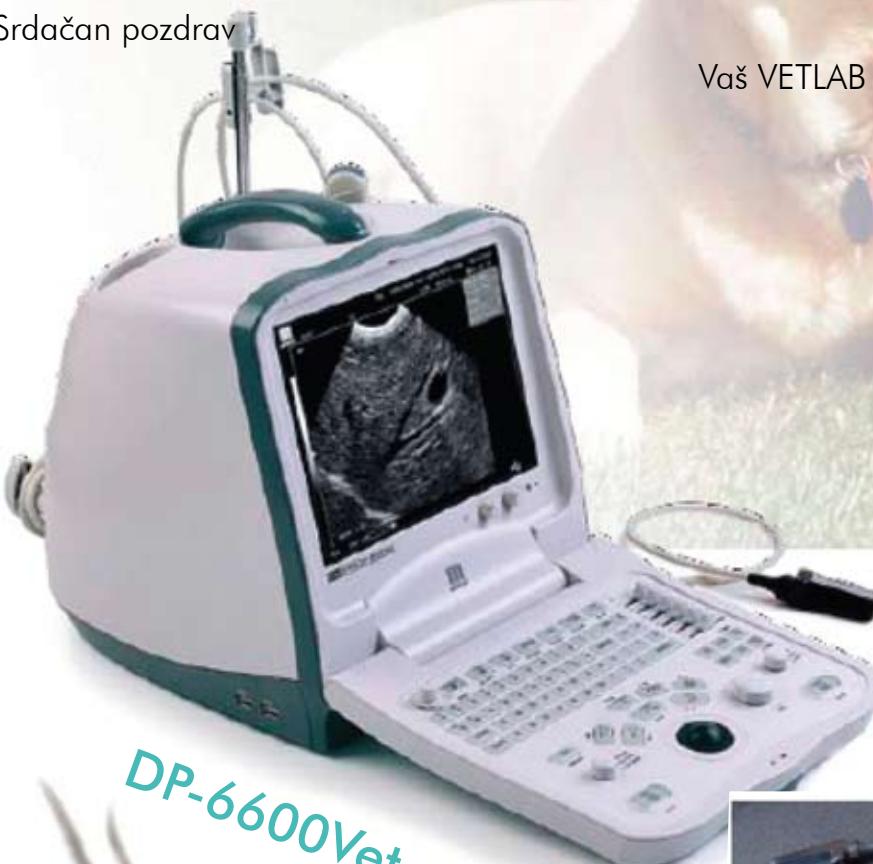

**MINDRAY™**

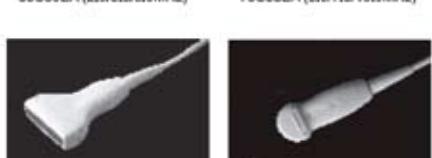



## MEC – 1200Vet

### Portable Veterinary Monitor

Koristi se za bezbedno izvođenje svih hirurških intervencija, prilikom kojih se na monitoru prate sve vitalne funkcije životinja. Prisutan je u svim veterinarskim ambulantama koje drže do svog renomea.



**MEC – 1200Vet je najprodavaniji model u svetu u protekle 3 godine.**

#### Tehničke karakteristike:

- 8.4" kolor TFT ekran , četvorokanalni
- Parametri: EKG/RESPIRACIJA, KONCENTRACIJA KISEONIKA U TKIVIMA U PROCENTIMA (SpO<sub>2</sub>), KRVNI PRITISAK (NIBP), TEMPERATURA, PULS
- 72-časovni grafički i tabelarni prikaz svih parametara
- Opciono- štampač i rezervna baterija
- Isključivo za upotrebu u veterini

#### Konektori:

SpO<sub>2</sub> senzor



EKG kabl



Manžetne za pritisak



## DRAMINSKI detektor ovulacije kod kuja

Prenosivi uređaj koji pomaže određivanje optimalnog vremena parenja.

Detektor je mali, prenosiv i veoma prilagodljiv aparat, radi na običnu bateriju od 9 V.

Radi na principu određivanja elektro-otpornosti vaginalne sluzi koja prolazi kroz karakteristične promene za vreme estrusa.

#### Prednosti:

- Isključuje višestruko parenje kod kuja
- Identificuje tzv. "lažni graviditet"
- Velika finansijska ušteda zbog isključivanja višestrukog parenja

Aparat je dostupan i u verzijama kao detektor estrusa kod svinja, ovaca, krava i kobila.



# POTROŠNI MATERIJAL ZA VETERINARSKE ORDINACIJE



## BUSTER zaštitna čizmica za pse

Proizvedena od čvrstog lateksa sa velkro-vrcem. Lako se postavljaju i održavaju. Dolaze u 3 veličine kao male, srednje i velike.

BUSTER zaštitna čizmica za pse sa mekanom ili tvrdim dnom

Služi kao navlaka preko zavoja za zaštitu od soli, trnja, kamenja, i ostalih oštih predmeta.

Čizma za pse može služiti i za prvu pomoć kod rana nogu i otvorenih povreda.



## BUSTER kompreza za hematome uha

12 x 8 cm, za terapiju hematoma uha, lako se reže na željenu veličinu, propusna za vazduh, ubrzava zarastanje rane, sterilno pakovana.




## BUSTER zaštitna kragna za pse i mačke

Novi, brzi, «Click» sistem za zatvaranje. Na taj način zatvaranje postaje jednostavno. Primenom prozirnog materijala životinji ostaje slobodno puno vidno polje. Proizведен iz 100% ekološkog PP-polietilena.

**KRUUSE**

# POTROŠNI MATERIJAL ZA VETERINARSKE ORDINACIJE

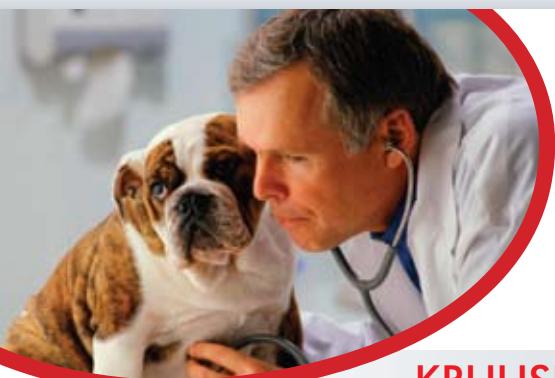

## KRUUSE Hirurški konac Polyglactine 910

Multifilamentni sintetički, resorptivni konac.

Dve nedelje nakon implantacije, tenzija konca se smanjuje za 50%.

Totalna resorpcija posle 56-70 dana.

Igla 3/8 kruga.

Dužina konca: 75 cm

12/pk



## KRUUSE Skalpel nožići, Karbon čelik

Domet KRUUSE scalpel nožića je produžen sa KRUUSE karbon čeličnom oštricom, što je jeftinija varijanta od one napravljene od nerđajućeg čelika.

Sterilno pakovanje.



# KRUUSE

## KRUUSE Skalpel nožići, nerđajući čelik

Dobro poznata, visokog kvaliteta sečiva od nerđajućeg čelika napravljena za hirurške i nožiće za brijanje.

Izrađuje se najfinijeg čelika.



## KRUUSE Fun-Flex Bandaže sa motivima 10/pk

Samolepljive bandaže sa različitim motivima.

Vodootporne i dugotrajne, jednostavne za aplikaciju.





### BUSTER cevasti rastepljivi bandaž

Olašava promenu zavoja.  
Poboljšava protok vazduha i ubrzava proces izlečenja.  
Nije potrebna nikakva traka da pričvrsti zavoj.

Ne cepa se.  
Dužina: 6.5 m

#### Aplikacije:

- Uho
- povrede glave kod velikih životinja
- kod konja koren repa
- povrede zglobova
- Abdominalna hirurgija
- povrede očne regije kod krava
- Kod infekcija uha naročito kod kokera
- povrede šapa kod mačaka



### VALUELINE Operaciona podloga

VALUELINE je u klasi popularnih proizvoda sa atraktivnom cenom koji ispunjavaju visoke standarde proizveo novi proizvod - Operaciona podloga

Veličina: 45 x 60 cm  
10 x 30/pk



### KRUTEX jednokratni operacioni mantil sa ubrusom. Sterilni proizvod

Novi i praktičan set sadrži jedan mantil i dva ubrusa (10 x 30cm)  
Napravljen je od otpornog materijala na vodu, krv i masnoće.  
50/pk



### BUSTER Vet Najlonska brnjica

Efikasna zaštita od nervoznih životinja – pasa i mačaka.  
Specijalan dizajn omogućava pokrivanje očiju životinje čime se ona smiruje i onemogućeno je grebanje i ujedanje.  
Zaštita i za veterinara i za vlasnika.  
Napravljeno od materijala koji propušta X-zrake..  
Pere se u mašini na 30°C.





# Hirurški stolovi

**1 | Hirurški sto za male životinje na električni pogon – model SL01**

**Veličina:** 120 x 60 x 78-92cm • električno održavanje konstantne temperature table • podešavanje table po nagibu

- visinsko podešavanje hidrauličnim sistemom
- pokretna žičana mreža za čišćenje nakon operacije



**2 | Hirurški sto za male životinje na električni pogon – model SL02**

**Veličina:** 120 x 60 x 75-95cm • električno održavanje konstantne temperature table • podešavanje table po nagibu

- visinsko podešavanje električnim pogonom • pokretna

žičana mreža za čišćenje nakon operacije

**3 | Hirurški sto za male životinje na hidraulični pogon – model SL03**




**Veličina:** 120 x 60 x 58-100cm • pokretna žičana mreža za čišćenje nakon operacije



**4 | Hirurški sto za male životinje na električni pogon – model SL04**

**Veličina:** 120 x 60 x 63-100cm • pokretna žičana mreža za čišćenje nakon operacije

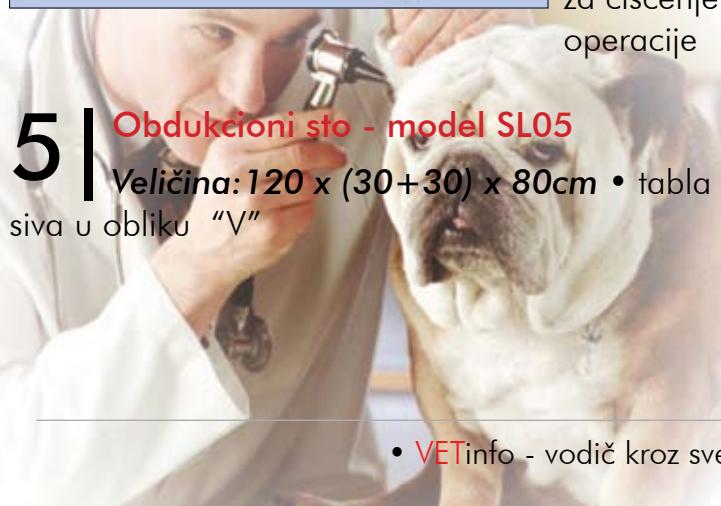

**5 | Obdukcioni sto - model SL05**

**Veličina:** 120 x (30+30) x 80cm • tabla stola podešiva u obliku "V"





## **6 | Dijagnostički sto - model SL06**

**Veličina:** 95 x 95 x 85cm • električno održavanje konstantne temperature table \*za životinje težine do 120 Kg



## **7 | Dijagnostički sto - model SL07**

**Veličina:** S: 90 x 50 x 85cm,  
L: 120 x 60 x 85cm



- električno održavanje konstantne temperature table

## **8 | Dijagnostički sto - model SL08**

**Veličina:** S: 90x50x85cm  
L: 120x60x85cm



## **9 | Stočić za instrume - mente - model SL09**

**Veličina:** 60 x 40 x 70-100cm



## **10 | Hirurški sto za male životinje na električni pogon – model SL10**

**Veličina:** 127 x 55 x 60-105cm • električno održavanje konstantne temperature table • podešavanje table po nagibu

- visinsko podešavanje električnim pogonom • pokretna žičana mreža za čišćenje nakon operacije



**Specijalan popust za narudžbine u toku januara i februara 2009. god.**



## Program za kućne ljubimce



Set za šišanje pasa i mačaka



Transporteri i kavezni različitih dimenzija i veličina



Fluoroscentna oprema za kućne ljubimce



Povodci, ogrlice i davilice

